


# PS 1201 B EXCELLENCE

**Miele**  
PROFESSIONAL

 Esterilización

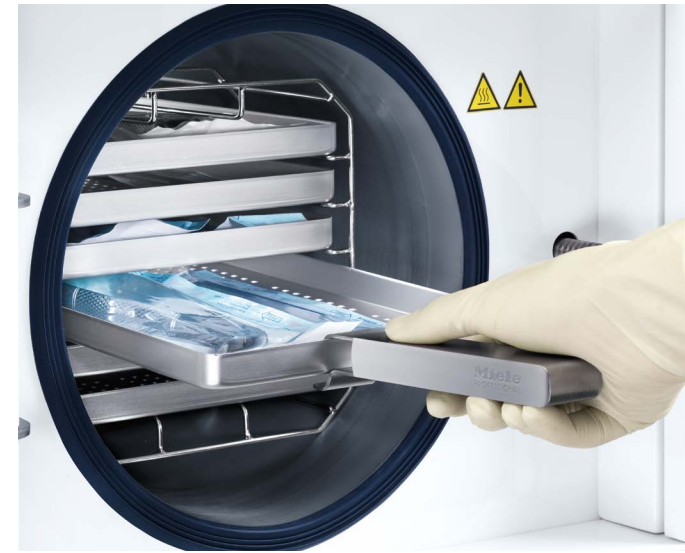

## Manejo intuitivo

El esterilizador de sobremesa Miele tiene un display de texto normal en alta resolución con 5 teclas de función para indicaciones de estado e informaciones que guían al usuario. La selección mediante la función Quickstart de un programa utilizado con mayor frecuencia permite un inicio particularmente rápido.

## Componentes de probada eficacia y seguridad

Los componentes del PS 1201 B EXCELLENCE se caracterizan por una cámara de doble pared con calefacción de vapor que se encuentra normalmente solo en esterilizadores de gran capacidad. El minucioso desarrollo de cada componente procura una óptima distribución del calor en la cámara y garantiza la esterilización fiable de todo el instrumental utilizado en el consultorio.

## Servicio Post-venta de Miele altamente cualificado

Miele ofrece una amplia gama de servicios orientados a las necesidades y exigencias de los hospitales y clínicas. Un equipo de técnicos, expertos en productos sanitarios, realizan estas prestaciones y están a disposición del cliente para ofrecer asistencia especializada en limpieza de instrumentos y tecnología aplicada.

## Exclusivo Miele

- En el 90% de las intervenciones de servicio técnico, la incidencia se resuelve en la primera visita
- Servicio de repuestos garantizado. Para componentes esenciales, incluso 15 años después de finalizar la producción de la máquina

## Contratos de servicio Miele

Miele recomienda a sus clientes disponer de contratos de mantenimiento, con el principal objetivo de garantizar el valor de la máquina y evitar costes inesperados. La posibilidad de realizar controles periódicos preventivos permite detectar a tiempo anomalías, evitando así posibles consecuencias, como períodos de fuera de servicio o importantes costes adicionales no previstos.

## El suministro incluye:

- 1 unidad de ZS 110: Soporte portabandeja 6/3 para la preparación de un máximo de 6 bandejas o 3 contenedores (máx. An 190 x Fo 340 x Al 48 mm)
- 3 unidades de ZS 131: Bandeja
- 1 unidad de ZS 130: Asa para el agarre seguro de las bandejas tras la autorización de la carga
- Manguera de entrada y de desagüe, cable de conexión eléctrica

## Accesorios opcionales:

- ZS 111 Soporte portabandeja 6/2 para la preparación de un máximo de 6 bandejas o 2 contenedores (máx. An 190 x Fo 340 x Al 65 mm)
- ZS 150-1 Test Helix
- ZS 171 Junta de puerta
- ZS 172 Filtro de ventilación estéril
- Soluciones para documentar la trazabilidad de procesos



Miele S.A.U.  
Av. Bruselas, 31  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Teléfono: 902 575 175  
Fax: 91 662 02 66  
www.miele-professional.es  
marketing.professional@miele.es

Miele Portuguesa, Lda  
Av. do Forte, 5  
2790-073 Carnaxide  
Portugal  
Tel. +351 214248425  
Telefax. +351 214248109  
www.miele-professional.pt  
www.miele-aquacare.pt

Miele Electrodomésticos Ltda.  
Av. Nueva Costanera 4055  
Vitacura - Santiago de Chile  
Chile  
Tel. +56 2 2957-0000  
Telefax +56 2 95700-79  
www.miele.cl

Miele, S.A. de C.V.  
Av. Santa Fe 170, int 0-4-2  
Mexico D.F.  
Lada sin costo: 01 800 MIELE 00  
Tel. +52 (55) 85 03 98 70, 73  
Telefax +52 (55) 85 03 98 70, 73  
www.miele-professional.com.mx

**Miele**  
PROFESSIONAL


## Nuevo Autoclave de sobremesa PS 1201 B EXCELLENCE, Clase B

Preparación rápida y segura del instrumental  
en las clínicas.



Distribuidor autorizado

Protección proactiva del medio ambiente:  
El papel de este catálogo ha sido blanqueado 100% libre de cloro.


 System4Med

# El esterilizador de sobremesa de Miele: Rendimiento y seguridad



Décadas de experiencia y máxima calidad son la base de la excelente reputación de Miele Professional en la limpieza y desinfección de productos sanitarios.

Esta larga tradición continua con el nuevo esterilizador de sobremesa PS 1201 B EXCELLENCE: innovadora tecnología para un alto rendimiento con una máxima seguridad y rentabilidad.

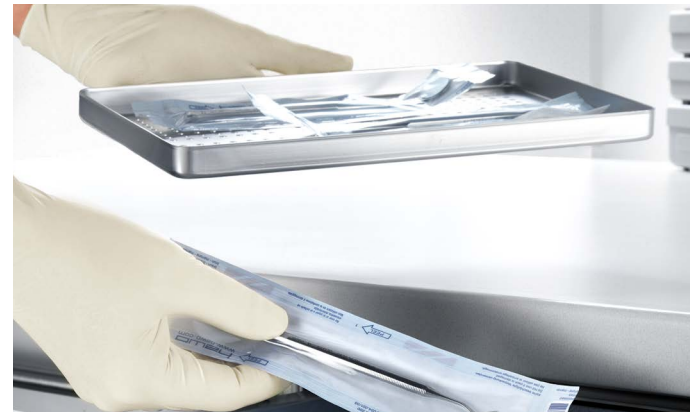

### Rápidez en los tiempos por carga

- Muy cortos tiempos de proceso, p.ej., 13 min/134 °C en el programa "Sin empaquetar" (incl. secado)
- Cámara con un volumen de 20 litros para un máximo de 6 kg de utensilios por carga
- Con función Quickstart para el programa utilizado con mayor frecuencia, que contribuye adicionalmente al ahorro de tiempo
- Se han duplicado los ciclos necesarios para someter la máquina a revisión; la primera inspección no es necesaria hasta los 2.000 ciclos, o el año de funcionamiento



### Excelente secado

- Potente bomba de vacío y sistema calefactor de superficie completa
- Secado rápido y altamente eficiente del material esterilizado y de la cámara de esterilización



### Acondicionador de agua integrado

- Conexión fija de agua con sistema Water-Proof (WPS)
- Disponibilidad continua de agua desmineralizada para la generación de vapor, gracias al equipo de ósmosis inversa integrado

# Esterilizador de sobremesa Clase B



### Esterilizador de sobremesa PS1201B EXCELLENCE

El esterilizador de sobremesa de Miele cumple con la norma DIN EN 13060.

Esterilizador de sobremesa	PS1201B EXCELLENCE
<b>Rendimiento</b>	
Capacidad por carga	6 kg de instrumental sin empaquetar
<b>Control/Programas</b>	
121°C Universal	• (33 mins.)*
134°C Universal	• (21 mins.)*
134°C Priones	• (35 mins.)*
134°C Sin empaquetar	• (13 mins.)*
Test de vacío	•
Test Helix-B&D	•
Interfaz serie RS 232 para la trazabilidad de procesos, ampliable a puerto USB	•
Bloqueo electromecánico de la puerta	•
<b>Conexiones de agua</b>	
Conexión fija de agua	•
Agua fría	1 x ¾", 1,5 m
Manguera de desagüe	1,5 m
Presión de flujo	1,5–10 bar
<b>Acondicionamiento del agua</b>	
Equipo de ósmosis inversa con filtros de depuración previa**	•
<b>Conexión eléctrica</b>	
Tensión	1 N AC 230 V 50 Hz
Potencia nominal total [kW]	3,2
Fusibles [A]	16
Cable de conexión eléctrica	2,0 m
<b>Dimensiones/Peso</b>	
Modelo de sobremesa	a partir de un fondo de encimera de 500 mm
Dimensiones Al/An/Fo [mm]	542/565/620
Dimensiones de la cámara Ø/Fo [mm]	250/400
Volumen de cámara [L]	20
Peso [kg]	63
<b>Declaración de conformidad según normas</b>	
DIN EN 13060, EN 1717, EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 61326-1	•
* Tiempo del ciclo incluido secado	
** Valor de conductividad máx. 375 µS/cm, de lo contrario es necesario utilizar un intercambiador iónico	

# Accesorios



**ZS 111 Soporte portabandeja 6/2** para el alojamiento de 6 bandejas ZS 131 o 2 contenedores con una altura máxima de 65 mm



**ZS 131 Bandeja**  
• Al 20, An 184, Fo 285 mm



**ZS 150-1 Helix-Test**  
Verificación del proceso de esterilización mediante la comprobación de la penetración del vapor con ayuda de un indicador químico  
Indicación del resultado mediante cambio de color  
1 PCD, 250 tiras indicadoras



**Impresora PRT 100 para la trazabilidad del proceso**



**Test de proteínas ProCare**  
• Para el control de residuos de proteínas después de la desinfección térmica  
• Detección y análisis cualitativo de eventuales residuos  
• Dosificación precisa  
• Corto tiempo de acción: 3 minutos  
• 3 uds. por referencia

Artículo	Descripción	Nº de material	Nº de artículo
PS 1201B EXCELLENCE	Esterilizador de sobremesa	9585460	63.1201.02
ZS 111	Soporte portabandeja	7876500	68.9111.01
ZS 131	Bandeja	7876510	68.9131.01
ZS 150-1	Test-Helix	9910260	68.9150.02
PRT 100	Impresora	7951540	68.8170.01
Cable PRT 100	Conexión máquina-impresora	6095260	68.8172.01
Papel PRT 100	5 rollos de papel por referencia	9063410	68.8170.03
Cartucho PRT 100	Cartucho de tinta impresora	9063390	68.8170.02
Test de proteínas ProCare	Test de proteínas ProCare	9635510	69.9101.02